

持ち運び可能で生活範囲がグンと広がる！  
手軽で清潔なHEPAフィルター式たん吸引器

# スッキリ すう太<sup>®</sup>

型式：FS 1000

HEPA(へパ)  
フィルター  
液溜め容器

スッキリ  
とれ太

液溜め容器に高性能除菌 HEPA(へパ)フィルターを採用。  
液が本体ポンプに影響しないので、洗浄がとってもカン  
タン。持ち運び可能なサイズで、充電バッテリーも内蔵。  
介護する人される人、両方にうれしい設計になっています。

承認番号：22000BZX00570000

第2種医療機器製造  
販売業許可番号：27B2X00226

類別：A 3200(医療用吸引器)

一般名称：電動式可搬型吸引器

医療機器分類：管理医療機器


E M C 適合：JIS T 0601-1-2:2002 に適合

# いつでも、どこでも。 手軽に清潔な口腔ケアを。

スッキリすう太は、タン液留め容器(スッキリとれ太)に極微細な粉じんにも効果を発揮する高性能のHEPA(ヘパ)フィルターを採用し、吸引時の雑菌を除菌。なおかつ容器内にティッシュペーパーを入れて液を受け止めるので、吸引ポンプ側が液の影響を受けにくくなります(ティッシュペーパーは、こまめに取りかえてください。ティッシュペーパーが濡れたり、フィルターが濡れたりして「スッキリすう太」本体に水が入ると、吸引に影響がでてきますので十分ご注意ください)。

また、HEPA フィルターが除菌を行いますので、電源供給ができない時やポンプ故障時には介護者の方が口で吸って吸引を行うことも可能です。電気供給のできない緊急時や、航空機など電源持込みの搭乗申請が不要になるなど、患者さまの生活範囲がぐっと広がります。

スッキリ  
すう太®

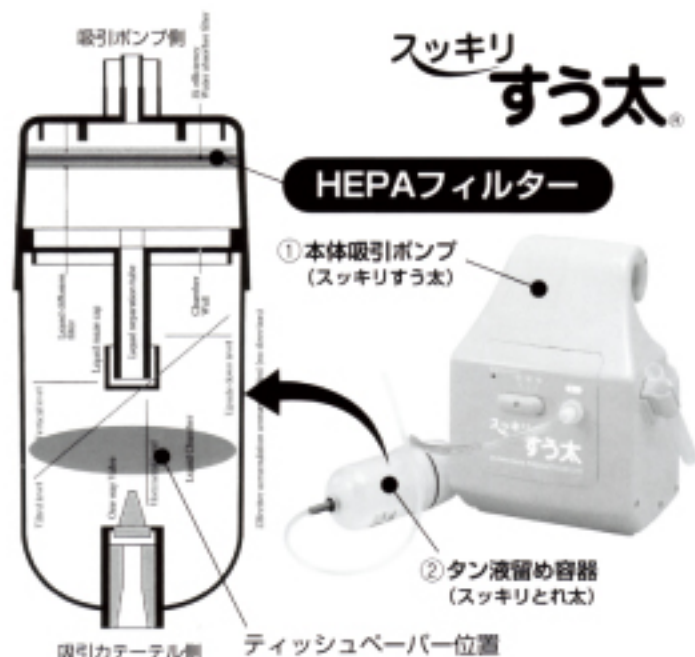

## 禁忌・禁止

- FS 1000を採血用には絶対使用しないでください。
- FS 1000は医師・医療従事者の指示に従ってください。吸引は医療行為です。医師又は医療従事者の指導によりご使用ください。

### 使用上の注意

- 発煙・異音・異臭がする場合は、直ちに使用をお止めください。
- 購入直後は必ず充電してください。初回充電は24時間程度必要です。
- 充電には、必ず付属の専用充電器を使用してください。
- 「スッキリとれ太」の液溜め量は64mlです。吸引容量を越えて吸引した場合は、フィルターが吸引液により目詰まりし、吸引できません。液溜め量は64mlを越えないようにしてください。
- 「スッキリとれ太」はカテーテルと延長チューブのみでは使用できません。
- 「スッキリすう太」を長期間使用しない時は、定期的な(2年毎)メンテナンスをおすすめします。
- 汚れは水・薄い中性洗剤を浸した布等で落とし、乾いた布などで拭き取ってください。
- 「スッキリすう太・とれ太」の分解・改造を禁止します。

### 【製品仕様】

品名	スッキリすう太
型式	FS 1000
排気流量	5.0ℓ/min(±10%)
吸引圧力	-56.52Kpa(±10%)
本体外形寸法	W170×D138×H238mm
使用電池	ニッケル水素電池 1.2V×3,000mA×3本(セル組電池)
重量	1.45Kg(附属品を含まず)
付属吸引容器容量	200mℓ(液室容量)
製造販売元	フカイ工業株式会社
総発売元	クリーン・ケア・プロダクツ株式会社

# KDD株式会社

滋賀県野洲市木部930  
077-589-2354 FAX077-589-4892

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記まで